

Urządzenie do mikrodermobrazji i masażu próżniowego MM-8424



SPIS TREŚCI

1	Użycie zgodnie z przeznaczeniem.....	1
2	Dane techniczne	2
3	Zasady bezpiecznego użytkowania.....	2
4	Objaśnienie symboli	3
5	Budowa.....	4
6	Zawartość zestawu	4
7	Użytkowanie	5
8	Czyszczenie i konserwacja	7
9	Naprawa	7

10	Przechowywanie i transport.....	7
11	Utylizacja	7
12	Deklaracja CE	8
13	Gwarancja.....	8

1. Użycie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie do domowej mikrodermabrazji pobudza naturalny proces regeneracji twojej skóry dzięki kombinacji złuszczenia naskórka i masażu podciśnieniowego. W efekcie Twoja skóra jest zregenerowana, ujędrniona i zachowuje młodzieńczy blask.

Przestrzeżenie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych

2. Dane techniczne

Numer partii	POJM180424
Model	MM – 8424
Parametry akumulatora	Li-Ion 3,7 V 600mAh
Parametry ładowania	5V 500 mA
Czas ładowania	Zależy od źródła zasilania

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat, jeżeli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
2. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.
3. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
4. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
6. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry twarzy.
7. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać masaż.
8. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
9. **Uwaga!** Przeciwwskazania do użycia urządzenia:
 - Nowotwór
 - ciąża i karmienie piersią
 - obecność metalowych implantów na obszarach poddawanych zabiegowi

- stany gorączkowe
 - choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze skóry
 - nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca
 - epilepsja
 - ropne stany zapalne skóry, dermatozy
 - terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem – 3 miesiące przerwy
10. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.
 11. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
 12. **Ostrzeżenie!** Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
 13. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
 14. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 15. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
 16. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
 17. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
 18. Urządzenie nie jest zabawką.
 19. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
 20. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem infolina@vershold.com.

4. Objasnienie symboli



Przeczytaj instrukcję



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.




Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – karton

5. Budowa

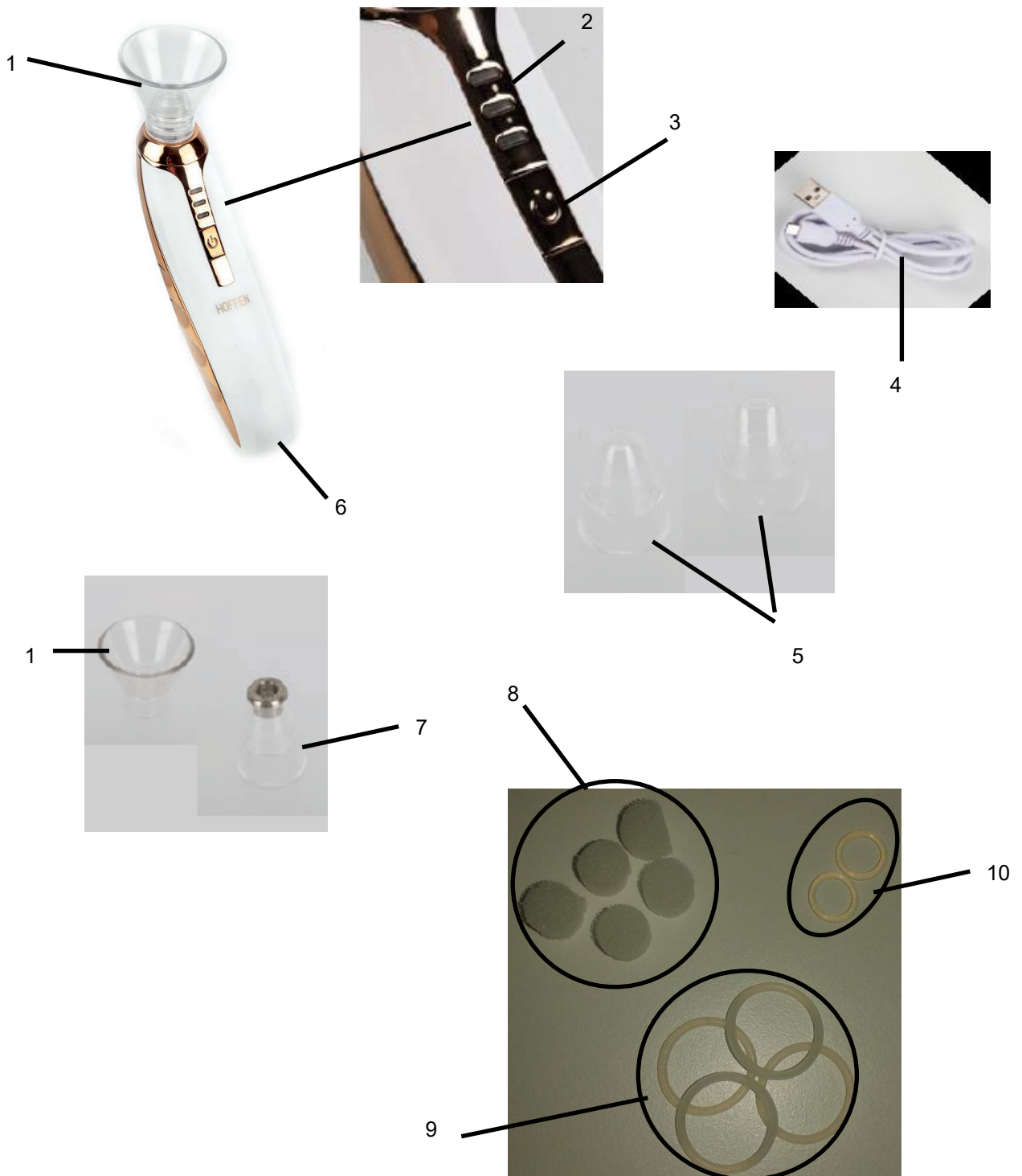

1	Nasadka do masażu antycellulitowego, próżniowego
2	3 stopniowa skala podświetlenia LED
3	Włącznik / wyłącznik / przełącznik prędkości zasysania
4	Przewód z końcówką USB
5	Nasadki do oczyszczania skóry
6	Gniazdo ładowania
7	Nasadka do mikrodermabrazji
8	Gąbeczki
9	Duże gumowe pierścienie
10	Małe gumowe pierścienie

6. Zawartość zestawu

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie:

ILOŚĆ ELEMENT

1	Urządzenie do Mikrodermabrazji i masażu próżniowego
1	Przewód USB do ładowania akumulatora
5	Nasadek
5	Gąbeczki
4	Duże gumowe pierścienie
2	Małe gumowe pierścienie
1	Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części, bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



Uwaga!

Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7. Użytkowanie

Ładowanie

1. Aby naładować urządzenie podłącz je za pomocą przewodu zasilającego do:
 - a) Komputera

- Podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę USB do wejścia USB w komputerze. Komputer musi być włączony.
- Po podłączeniu do komputera podświetlenie LED zapali się na niebiesko i będzie migać.
- Trzystopniowa skala podświetlenia LED:

- trzy podświetlenie światłem ciągłym – całkowite naładowane.

- dwa podświetlone światłem ciągłym – w połowie naładowane

- jedno podświetlone światłem ciągłym – naładowane w 1/3

- Gdy urządzenie będzie naładowane, podświetlona cała skala LED- światłem ciągłym. Po chwili zgaśnie.

b) Zasilacza (nie dołączony do zestawu)

- Podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę USB do wejścia USB zasilacza o parametrach zgodnych z oznaczeniem na etykiecie urządzenia. Zasilacz podłącz do gniazda sieci elektrycznej o tych samych parametrach co oznaczone na etykiecie zasilacza.

- Po podłączeniu do zasilacza podświetlenie LED zapali się na niebiesko i będzie migać.

- Trzystopniowa skala podświetlenia LED:

- trzy podświetlenie światłem ciągłym – całkowite naładowane.

- dwa podświetlone światłem ciągłym – w połowie naładowane

- jedno podświetlone światłem ciągłym – naładowane w 1/3

- Gdy urządzenie będzie naładowane, podświetlona cała skala LED- światłem ciągłym. Po chwili zgaśnie.

Czas ładowania zależy od źródła ładowania.

Włączanie/wyłączanie

1. Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk znajdujący się na środku urządzenia.
2. Klikając raz włączy nam się opcja zasysania na najniższym poziomie.
3. Klikając drugi raz włączy nam się opcja zasysania na średnim poziomie.
4. Klikając trzeci raz włączy się opcja najmocniejszego zasysania.

Użytkowanie

Zaleca się bardzo dokładne oczyszczenie skóry twarzy przed przystąpieniem do zabiegu. I pozostawić do całkowite wyschnięcia.

Wybierz odpowiednią nasadkę.

Nałóż ją i włącz urządzenie. Włącz urządzenie wybierając poziom zasysania. Patrz **Włączanie/wyłączanie.**

Przystąp do zabiegu.

Zabieg na całej buzi (poliki i czoło z ominięciem okolic oczu i nosa) zaleca się zacząć od żuchwy, prawego lub lewego policzka. Dobrze naciągnąć skórę. Przyłożyć urządzenie twarzy na krawędzi żuchwy i przesuwaj się ku górze w linii prostej. Następnie lekko przesunąć w bok (o szerokość danej nasadki) i kolejny raz powoli przesunąć się ku górze w linii prostej.

To samo zrób na drugim policzkiem.

Czoło „dzielimy na pół” i wykonujemy w poziomej linii. Wykonując zabieg na prawej stronie, potem na lewej lub odwrotnie. Zaczynamy od środka i kierujemy się na zewnątrz czoła w linii prostej.

Okolice brody zaleca się wykonywać na samym końcu.

Zaleca się omijanie okolic oczu i nosa. Do tego celu należy użyć innych nasadek.

Uwaga! Nie należy wykonywać zabiegu dwa razy na tym samym odcinku twarzy. Pamiętać, aby skórę naciągnąć.

Skóra po zabiegu może być lekko zaczerwieniona.

Czas trwania zabiegu zależy do wprawy użytkownika.

Zalecane jest obejrzenie filmików instruktorzowych dostępnych w sieci.

Gąbeczki i gumowe pierścienie zaleca się wymieniać w miarę potrzeb i zużycia.

Dołączone są następujące nakładki :

- Nakładka do mikrodermabrazji używana do ścierania martwej części naskórka nadaje skórze witalności (7).
- Duża nakładka do masażu antycellulitowego, próżniowego (1).
- Owalna końcówka służy do oczyszczania twarzy w trudno dostępnych miejscach tj. zagięcie w okolic nosa (5).
- Końcówka z małym otworem służy do delikatniejszego oczyszczania twarzy polecana do ściągania wszelkich tłustych zanieczyszczeń ze skóry twarzy (5)
- Końcówka z większym otworem służy do silniejszego oczyszczania twarzy. Zaleca się używać jej raz w tygodniu przez 5 minut aby zauważyć poprawę kondycji skóry (5).

8. Czyszczenie i konserwacja

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie.

1. Szpatułka powinna być zdezynfekowana po każdym użyciu.
2. Pozostaw części do wyschnięcia zanim użyjesz urządzenie ponownie.
3. Nie czyść przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.

9. Naprawa i konserwacja

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjalście.

10. Przechowywanie i transport

1. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.
3. Przechowuj urządzenie z założoną nakładką na końcówce.

11. Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.



Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



12. Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13. Gwarancja

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

- infolinia@vershold.com
- lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna wada urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Producent (Gwarant):

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach